



הנחיות לבדיקת חלבון בשתן בסטיק (ALBUSTIX)

הורים יקרים,

בדיקת חלבון בשתן בסטיק מתבצעת כדי לזהות נוכחות חלבון בשתן. את הבדיקה מבצעים על פי הנחיות הרופא המטפל ולאחר הדרכה מתאימה.

1 שלב

יש לאחוז את הסטיק מהקצה החופשי שלו. אין לגעת עם היד בכרית הסטיק.


יש לפתוח את קופסת הסטיקים, להוציא את אחד הסטיקים ואחר כך יש לסגור מיד את מכסה הקופסה.

יש לבדוק את תאריך התפוגה של המוצר (שימוש בסטיק מעבר למועד התפוגה עשוי להציג תשובות לא נכונות).

2 שלב

יש לטבול את הסטיק בדגימה משתן טרי ולהוציא מיד. בזמן הוצאת הסטיק, יש לנגב שתן עודף על שפת כלי השתן.

3 שלב

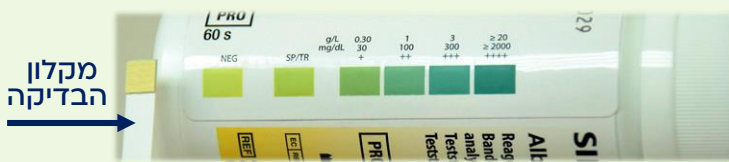

יש להמתין 60 שניות, ולאחר מכן להתאים את סטיק הבדיקה למקרא הצבעים שעל כלי הבדיקה. אין לקרוא את הבדיקה אם חלפו יותר מ-2 דקות, מכיוון שאז היא מאבדת מערכה האבחנתית.

4 שלב

שתן תקין וטרי הוא בעל מראה צלול. כאשר נמצא בבדיקת השתן חלבון או כל ממצא אחר שאינו תקין (צבע, מראה עכור, ריח לא אופייני), חשוב להתייעץ עם רופא.

יש לכתוב את התוצאות.

מהם תנאי האחסון?

אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה שעל גבי המוצר. יש לשמור את המוצר בטמפרטורת החדר, בין 15° ל-30° מעלות צלסיוס.

היכן ניתן לרכוש את המוצר?

ניתן לרכוש את המוצר בסניפי בתי המרקחת עם מרשם רופא. ללקוחות הכללית, מומלץ לבדוק קודם באפליקציית כללית, האם המוצר נמצא במלאי בבית המרקחת הקרוב אליכם.

שימו לב:

תוצאות תקינות אינן שוללות בעיה רפואית ולכן חשוב להיות במעקב רפואי מסודר



מרכז בריאות כללית
צוות המכון לנפרולוגיה

